



AQUISEL, S.L.U.

FICHA TÉCNICA

Doc. – Sub

ESP-1800500-01

Rev.

0

Fecha / Date

09/10/2019

Pág. 1/2

DESCRIPCIÓN

AQUISFEK SF-FIX 3,3 mL

REF. COMERCIAL

1800500

Reactivo

Disolución fijadora SF-FIX

Finalidad prevista

Tubo con fijador para la recogida de muestras de heces y posterior concentración de las formas parasitarias presentes en las mismas, mediante filtración y centrifugación.

Lleva incorporado un sistema de filtros que mejoran la dispersión de la muestra para facilitar el filtrado y un fijador que permite la conservación de la morfología parasitaria.

Para diagnóstico "in vitro".

Características del método y procedimientos descritos en las hojas de acompañamiento **ICO-023-SF-FIX y Fichas datos seguridad del fijador**



Incluir hoja
ICO-023-SF-FIX



Características de los materiales y de dimensión del tubo

Tubo partes	Tubo donde va el aditivo		Polipropileno	
	Tubo centrifugado		Polipropileno	
	Cuchara toma muestra y doble filtro		Polipropileno	
Tubo dimensiones	Longitud:	127,5 mm	Diámetro máximo	17,2 mm
Composición reactivo	Etanol 20% + Sulfato de zinc < 0,25% + Glioxal < 3% + Estabilizantes y conservantes			

Condiciones de almacenamiento y conservación

El periodo de caducidad es de 24 meses desde su fabricación (ver etiqueta caja exterior y etiqueta tubo)

No exponer al sol de forma continuada y almacenar a temperatura entre 4 – 30°C.

El reactivo debe manipularse con precaución. Consultar ficha de datos de seguridad.

Presentación del producto

100 uds caja

Caja (cm): 23 x 23 x 17 (L x A x H)

Volumen : 0,009 m³

Peso aprox.: 1,2 Kg

Recomendaciones para la eliminación:

Aplicar la legislación vigente en materia de eliminación de material con riesgo biológico.

Referencias :

Producto sanitario para el diagnóstico InVitro (IVD) según Dir. 98/79/CE # R.D. 1662/2000

Sistema de Gestión de Calidad : EN ISO 9001 – 13485





AQUISEL, S.L.U.

FICHA TÉCNICA

Doc. – Sub

ESP-1800500-01

Rev.

0

Fecha / Date

09/10/2019

Pág.


2/2

ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN

Ej. Etiqueta 45x35 tubo (1 uds)



Ej. Etiqueta caja exterior 110x120 (100 uds)

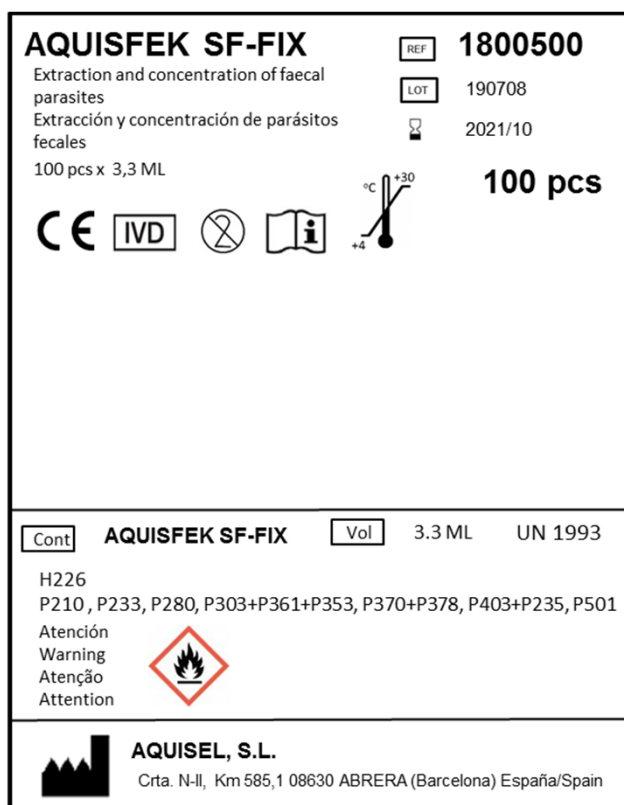

CAMPO	SIGNIFICADO
REF	1800500
LOT	12: (año fabricación) 3456 (nº correlativo fabricación del año)
Fecha Caducidad	AAAA-mm (año – mes)
No.	Nº caja correlativo fabricación
GS1-128 (EAN – 128) CODIGO BARRAS	
Símbolos	
IVD	In Vitro Diagnostic
CE	Marcado CE conforme RD 1662/2000 producto sanitario IVD
	Un solo uso
	Instrucciones de acompañamiento
	Rango de temperatura recomendado de almacenamiento
	Fabricante
	Símbolo químico inflamable
H P	H: Indicación peligro (GHS / CLP) P: Consejo de prudencia (GHS/CLP)
UN 1993	Nº ONU (Clasificación ADR)
Software	File: ESP-1800500-00-A-Et

Distribuido por:

JP SELECTA S.A.U.

Autovía A-2, Km 585,1 - 08630 Abrera (Barcelona) – España

Tel. ++ 34 93 770 0877 Fax ++34 93 770 2362 www.grupo-selecta.com/es

Contacto comercial: tender@jpselecta.es

Soporte técnico: ecatalan@aquisel.es

file.:1800500-01-0



AQUISEL, S.L.U.

Crta. N-II, Km 585,1 - 08630 Abrera (Barcelona) España