



Labcare
de Colombia



 Trinity Biotech

Ultra Genesys

Detección Automatizada de
Hemoglobinopatías en Sangre Seca

Líder en la detección de Hemoglobinas

El Ultra **GeneSys™** de Trinity Biotech, ofrece una solución completamente automatizada para la detección de hemoglobinopatías en muestras de sangre seca (en papel filtro) por el método HPLC de intercambio iónico. (HPLC: High Pressure Liquid Chromatography)



Preparación automatizada del hemolizado a partir de los spots de papel filtro



Tamizaje de hemoglobinas anormales en 2 minutos (Quick Scan Assay)



Reproceso automático de muestras anormales (High Resolution Assay)



Identificación de hemoglobinas F, A, S, C, D, E, O, Bart y alrededor de 500 variantes



Biblioteca disponible de más de 500 variantes de hemoglobina




Reporte de resultados cuantitativos y fenotipos




Servicio especializado de interpretación y confirmación de Hemoglobinopatías

Reporte

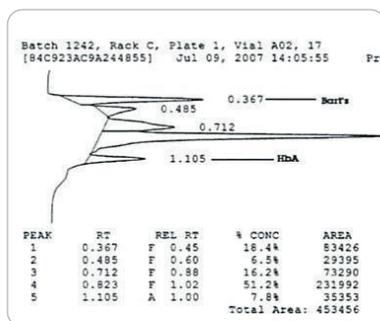

Hemolizados del papel filtro

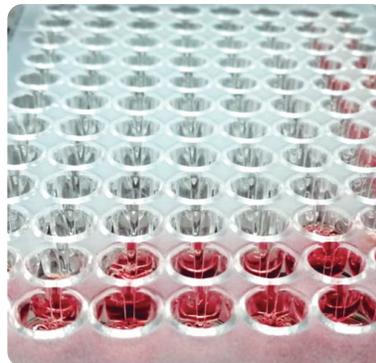

Autosampler con microplacas

