

Tamizaje Neonatal de Hemoglobinopatías HPLC



Ultra 2 Resolution Variants versión **GeneSys™**

Líder en la detección de Hemoglobinas



El Ultra 2 Resolution Variants versión **GeneSys™** de Trinity Biotech, ofrece una solución completamente automatizada para la determinación de las variantes de hemoglobina en muestras de sangre de recién nacidos en papel de filtro por el método HPLC de intercambio iónico.

(HPLC: High Pressure Liquid Chromatography)



Preparación automatizada del hemolizado a partir de los spots de papel filtro



Tamizaje de hemoglobinas anormales en 2 minutos (*Quick Scan Assay*)



Reproceso automático de muestras anormales (*High Resolution Assay*)



Identificación de hemoglobinas F, A, S, C, D, E, O, Bart.



Biblioteca disponible de más de 500 variantes de hemoglobina




Reporte de resultados cuantitativos y fenotipos




Servicio especializado de interpretación y confirmación de Hemoglobinopatías

Reporte

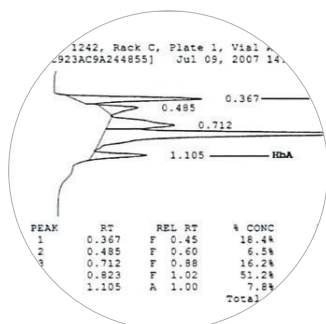

Hemolizados del papel filtro

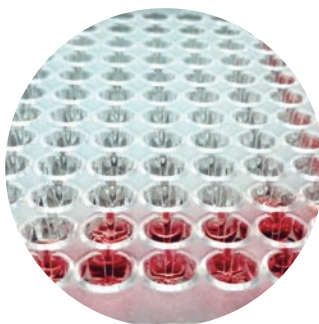

Autosampler con microplacas

