



Labcare
de Colombia



MSC 100



VETERINARIA

Analizador de Química y Coagulación



Coagulación y Química, 2 pruebas en 1




Bandeja dual, muestra de sangre total



Disco de reactivo liofilizado, larga vida útil



Compacto y fácil de usar

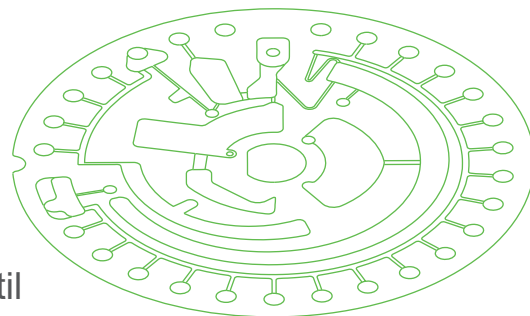

Especificaciones Técnicas

Principio de Prueba	Colorimétrico -fotoeléctrico
Tipo de Muestra	Sangre total, suero, plasma
Tipo de Reactivo	Liofilizado
Volumen de muestra	140µL / 180µL
Tiempo	≤12 minutos
Identificación	Automatica por lectura de código QR del disco de reactivo
Impresora system	Impresora térmica incorporada. También disponible para impresora externa
Tamaño	270mm*180mm*155mm
Peso	≤3Kg



Reactivos

Química Veterinaria General [PK VE60002]	Proteína Total, Albúmina, Bilirrubina Total, ALT, ALP, CK, Amilasa, Creatinina, Urea (BUN), Colesterol Total, Glucosa, Calcio, Fósforo Inorgánico, *Globulina, *A/G, *BUN/Cr
Función Renal Veterinaria [PK VE60003]	* Albúmina, Fósforo Inorgánico, Urea (BUN), CO2, Creatinina, Calcio, *BUN/Crea,
Electrolitos Veterinarios [PK VE60004]	K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , tCO ₂ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺ , P ⁺ .
Función Hepática Veterinaria	Albúmina, Proteína Total, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa ALP, ALT, γ-GT, *Globulina, *A/G.
Coagulation Veterinaria	PT, *INR, APTT, TT, FIB

*Calculado


Proceso de Operación



Adicione la muestra y buffer de dilución



Click "Start"

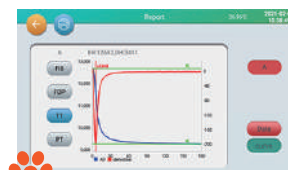

Reporte en 12 minutos