




DIRUI Labcare

FUS-3000Plus NEW
Analizador híbrido para uroanálisis

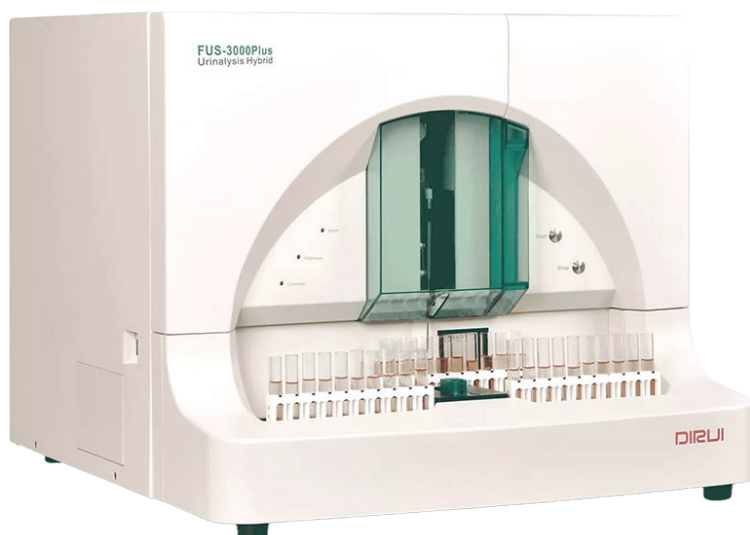

INTEGRA EL ANÁLISIS FÍSICO,
QUÍMICO Y DE ELEMENTOS
FORMES DE LA ORINA



Contacte a su asesor comercial o llámenos + 57 310 6 88 82 59 • www.labcarecolombia.com • ventas@labcarecolombia.com

FUS-3000Plus ^{NEW}

Analizador híbrido para uroanálisis

DIRUI

PRINCIPIO Y TECNOLOGÍA AVANZADA

Tecnología de micro - imagen por citometría de flujo para resultados más precisos y confiables

TECNOLOGÍA DE FLUJO SHEAT

Los elementos formes de la orina son dirigidos mediante el reactivo Sheat para evitar la unión o superposición entre ellos

TECNOLOGÍA DE FOTOGRAFÍA DE ALTA VELOCIDAD

Imágenes de 2000 fotografías con aumento de 400 x para aumentar la tasa de detección


IDENTIFICACIÓN CON IA

Para obtener resultados altamente concordantes con el **Gold Standard**

Información clínica más completa:

¡43 parámetros!

25 parámetros de sedimento urinario
+ 14 parámetros químicos + 4 parámetros físicos

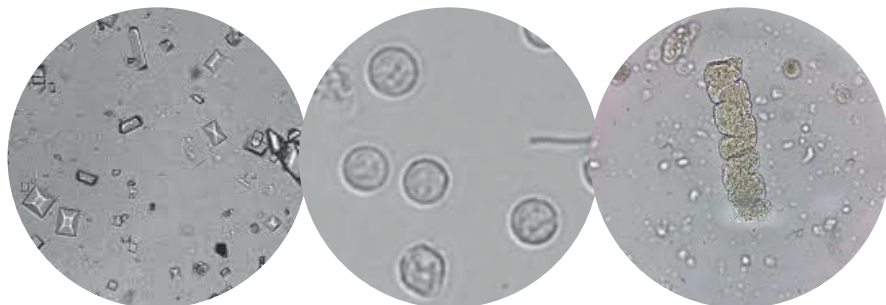

Función de prueba de tamizaje: De acuerdo al resultado químico, activa el modo de Elementos Formes de manera inteligente

ALTO RENDIMIENTO:

Modo Híbrido - Elementos Formes:

120 muestras / Hora

Modo parámetros químicos:

240 Test / Hora

PARÁMETROS FÍSICOS

Conductividad (Opcional)

Gravedad Esp. (Opcional)

Color (Opcional)

Turbidez (Opcional)

PARÁMETROS QUÍMICOS

UBG, BIL, KET,
PRO, BLD, LEU,
NIT, GLU, pH, SG,
VC (Opcional), MALB (Opcional)

ELEMENTOS FORMES

NRBC, MIRBC, ARBC, SRBC, OCRBC,
WBC, WBCC, SQEP, RTEP, TREP, HYAL,
GRAN, WAXY, BROAD, OCAS, BACI,
SUCO, HYST, BYST, CAOX, URIC,
MAPH, OCRY, SPRM, MUCS

Comunicación bidireccional
con el LIS del laboratorio

Sistema completo de garantía de
calidad para el aseguramiento de
la confiabilidad de los resultados



Contáctenos:
310 6888259 • 314 2852622
www.labcarecolombia.com
ventas@labcarecolombia.com
Importador y distribuidor autorizado para Colombia